

Aktivní ortéza PRO s infračerveným zářením

Návod



Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení pro péči o kolena. Tato uživatelská příručka poskytuje důležité informace o používání a bezpečnosti. Přečtěte si tuto příručku pečlivě a před použitím ji důkladně prostudujte. Uchovejte tuto příručku pro budoucí použití.

POZNÁMKA: Toto zařízení není určeno k lékařskému použití. Je určeno pouze k poskytování relaxační masáže v domácím prostředí.

SOUČÁSTI PRODUKTU



1. Ovládací panel
2. ABS skořepina
3. Kryt obvodové desky
4. Vibrační jednotka (2 kusy)
5. Spektrum
6. TPU skořepina
7. Vyhřívací podložka

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Adaptér

Nastavitelný pás

VLASTNOSTI

- Infračervená světelná a tepelná terapie (R:620-625NM, G:520-525NM, B:466-470NM)
- Nastavitelná teplota 40°-65°C (104°-149°F)
- Vibrační masáž (2*Vibrátory)
- Odnímatelné a nastavitelné popruhy na koleno
- Obsahuje dva popruhy
- Pohodlné, ergonomicky navržené polstrované tělo
- Funkce paměti teploty
- Napájení z elektrické zásuvky

POZNÁMKA

- Výchozí doba pro infračervenou tepelnou terapii je 30 minut. Stiskněte tlačítko start/stop na ovládacím panelu znovu, pokud potřebujete více cyklů.
- V různých režimech budou některá tlačítka pro různé funkce uzamčena. Přečtěte si návod JAK OVLÁDAT pro více podrobností.

OVLÁDACÍ PANEL




JAK POUŽÍVAT

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

1. Umístěte pohodlný polstrovaný kryt dovnitř zařízení.
2. Přiložte masážní přístroj na koleno, s ovládacím panelem směřujícím nahoru.
3. Upravte popruhy tak, aby přístroj správně seděl naoleni.
4. Pro nejlepší výsledky umístěte masážní přístroj co nejbližce ke křivce kolena.
5. Připojte napájecí kabel k zařízení a adaptér zapojte do elektrické zásuvky.
6. Automatická kontrola systému. LED světlo a ovládací panel se zapnou a poté vypnou.
7. Zařízení je připraveno ke spuštění.
8. Vyberte režim.


Režim I (ohřev)

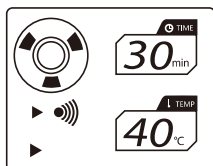

Stiskněte , zařízení začne pracovat v režimu **topení**. V tomto režimu mohou uživatelé stisknout „+“ nebo „-“ pro změnu požadované teploty (**40°C-65°C**).


(POZNÁMKA: Změna teploty mezi 40°C a 55°C je v krocích po 5°C. Od 56°C do 65°C se teplota zvyšuje po 1°C.)

Režim II (slabé vibrace)

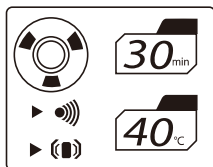


Stiskněte , zařízení bude provádět **slabé vibrace**. V tomto režimu mohou uživatelé stisknout „+“ nebo „-“ pro změnu požadované teploty (**40°C-65°C**).

Režim III (silné vibrace)

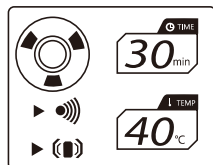

Stiskněte , zařízení bude provádět **silné vibrace**. V tomto režimu mohou uživatelé stisknout „+“ nebo „-“ pro změnu požadované teploty (**40°C-65°C**).

Režim IV (střídavé vibrace)

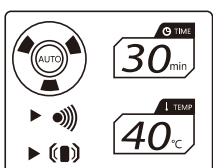

Stiskněte , zařízení se přepne do režimu **automatického střídání vibrací**. V tomto režimu se vibrace střídají mezi silnými a slabými, a uživatelé mohou stisknout „+“ nebo „-“ pro změnu požadované teploty (**40°C-65°C**).

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Toto zařízení je určeno pouze pro vnitřní, domácí použití.
- Nikdy nenechávejte toto zařízení bez dozoru, když je zapojené do zásuvky.
- Vždy po použití odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte zařízení v blízkosti topení, krbu, kamen nebo jiného zdroje tepla a vyhněte se kouření při používání tohoto masážního přístroje.
- Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud je zástrčka nebo kabel poškozený, zlomený nebo mokrý.
- Vždy zapojujte zástrčku do zdroje napájení, když je zařízení vypnuté (v pozici OFF).
- Nepoužívejte toto zařízení v sauně, koupelně nebo v oblasti s vysokou vlhkostí.
- Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud je vaše tělo nebo cílová oblast mokrá.
- Po jídle počkejte 60 minut, než zařízení použijete.
- Uchovávejte mimo dosah dětí za všech okolností.
- Nepoužívejte tento produkt během spánku.
- Aby nedošlo k nadměrné stimulaci svalů a nervů, doba masáže by neměla přesáhnout doporučených 60 minut (výchozí čas je 30 minut, vždy si udělejte přestávku 5 až 10 minut, pokud chcete pokračovat v dalším cyklu).

UPOZORNĚNÍ: KE SNÍŽENÍ RIZIKA POPÁLENIN, POŽÁRU, ELEKTRICKÉHO ŠOKU NEBO ZRANĚNÍ OSOB:

- Nepoužívejte pod dekou, polštářem nebo jinými materiály. Může dojít k nadměrnému zahřívání, což může způsobit požár, elektrický šok nebo zranění.
- Toto zařízení používejte pouze k účelu popsánému v tomto návodu.
- Nikdy neprovozujte zařízení, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, nebo pokud spadlo, je poškozené nebo spadlo do vody.
- Nepřenášejte toto zařízení za napájecí kabel a nepoužívejte kabel jako rukojeť.
- Před vytažením zástrčky ze zásuvky nastavte všechny ovládací prvky do pozice

OFF.

- Používejte pouze originální AC adaptér dodaný s tímto zařízením.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny před použitím tohoto masážního přístroje. Pokud trpíte některým z níže uvedených zdravotních stavů, poraďte se před použitím tohoto zařízení se svým lékařem.

Doporučujeme poradit se se svým lékařem před použitím tohoto zařízení, pokud:

- Trpíte srdečním onemocněním nebo srdeční vadou.
- Máte poruchu citlivosti nebo kardiostimulátor.
- Trpíte osteoporózou nebo diabetem.
- Vám lékař zakázal cvičení.
- Jste těhotná, máte zhoubný nádor nebo kožní alergii.
- Podstupujete lékařskou léčbu.
- Máte tělesné postižení.

ÚDRŽBA A PÉČE

- Uchovávejte toto zařízení na suchém místě bez vlhkosti, pokud jej nepoužíváte.
- Neomotávejte napájecí kabel kolem zařízení.
- Nevěšte zařízení za napájecí kabel.
- Udržujte zařízení mimo dosah všech rozpouštědel a agresivních čisticích prostředků.
- Odpojte zařízení a nechte jej vychladnout před čištěním. V případě potřeby otřete měkkým, suchým hadříkem.
- Nikdy neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, kartáče, benzín, petrolej, leštidlo na sklo/nábytek nebo ředidla na barvy k čištění masážního přístroje.

PARAMETRY

MATERIÁL: ABS, TPU, EVA

VELIKOST: UNIVERZÁLNÍ

BARVA: ŠEDÁ / MODRÁ

NAPĚTÍ: 12V DC

CYKLUS: 30 MINUT

FUNKCE: MASÁŽ, TEPELNÁ TERAPIE, FOTOTERAPIE, IR terapie

POUŽITÍ: BOLEST KOLEN, UVOLNĚNÍ SVALŮ, DISKOMFORT KLOUBŮ