

Elektronický trakční masážní přístroj TrakPro

Návod



Přečtěte si prosím tento návod pozorně a pochopte jej důkladně před použitím. Tento návod si uchovejte pro budoucí použití.

POZNÁMKA: Toto zařízení je určeno k relaxační masáži doma, nikoli k lékařskému ošetření.



ČÁSTI PRODUKTU

- ① Vibrátor ② Vzduchový polštář ③ Topná fólie ④ Airbag
⑤ Ovládací panel ⑥ Zaklad


ADAPTÉR

(Je součástí balení. Adaptér je přizpůsoben vašemu místnímu napájecímu standardu.)



POZICE PRO PROVOZ

- Pohodlí je nejdůležitější.
- Zařízení umístěte pod pas mezi bederní oblast L1 a L5.
- Zařízení umístěte na tvrdý povrch nebo použijte pevný polštář pod zařízením pro vyrovnaní během používání.

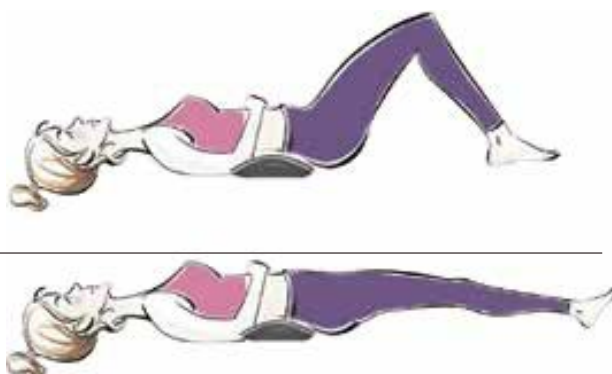

VLASTNOSTI

- Systém vzduchového napínání
- Nastavitelná teplota (Nízká / Střední / Vysoká)
- Vibrační masáž
- Obsahuje jeden pár elektrických podložek
- Pohodlně, ergonomicky navrženo podle křivek těla
- Napájení z AC zásuvky a DC vstup do zařízení

POZNÁMKA

- Výchozí čas pro tepelnou terapii je 15 minut. Po 10 minutové pauze stiskněte tlačítko On/Off na ovládacím panelu, pokud potřebujete další cyklus.
- V různých režimech jsou některá tlačítka pro různé funkce uzamčena. Přečtěte si JAK OVLÁDAT pro více informací.
- Pacienti s diabetem a hypertermií by měli toto zařízení používat opatrně.

Upozornění: Nepoužívejte funkci EMS a připojujte elektrody současně.



OVLÁDACÍ PANEL

- Displej
- Automatický režim
- Vibrace
- Topení
- Strečink
- EMS

PROVOZ

PŘÍPRAVA PŘED OŠETŘENÍM

Pro výběr správného místa pro použití se podívejte na „POZICI PRO PROVOZ“ na straně 2.

1. Zapnutí/Vypnutí a přepnutí režimu

Stiskněte tlačítko  **AUTO** On/Off pro zapnutí zařízení a přechod do manuálního režimu. Dotkněte se tlačítka  **AUTO** Režim pro přepínání mezi Auto 1, Auto 2 a Manuálním režimem. Stiskněte a podržte pro vypnutí.

2. Manuální režim

Režim vzduchového tlaku:

Po zapnutí zařízení stiskněte tlačítko  **Air inflate** pro spuštění základního napínání, pas se zvedne, uvolněte tlačítko, jakmile dosáhnete požadované výšky tlaku. Stiskněte tlačítko  **Air inflate** uvolnění vzduchu pro uvolnění tlaku.

Vibrační masáž

Dotkněte se tlačítka **Vibrate** pro zapnutí vibrační masáže a přepínejte mezi nízkou, střední a vysokou intenzitou nebo vypněte.

Režim topení:

Dotkněte se tlačítka **Heat** topení pro zapnutí režimu topení a přepínání mezi nízkou, střední a vysokou intenzitou.

Režim EMS:

Dotkněte se tlačítka **EMS**  **EMS mode** pro zapnutí a přepínání mezi režimy 1, 2, 3 nebo vypnutí.

Nastavení intenzity:

Použijte tlačítka +/– pro zvýšení nebo snížení intenzity. Úroveň intenzity bude zobrazena na displeji od 1 (nejnižší) do 3 (nejvyšší).

3. Automatický režim


Auto 1: Plná funkce (Kombinované napínání + vibrace). V tomto režimu nelze nastavovat topení a EMS.

Auto 2: Režim topení + EMS (Napínání zad + Topení + EMS). V tomto režimu lze nastavit funkci EMS.

Poznámky

1. Topná podložka automaticky nastaví teplotu podle podmínek použití (s nebo bez oděvu). Teplota bude vyšší při používání s oděvem.
2. Zařízení má systém auto-indukce teploty. Prosím, neměňte výchozí teplotu během spuštění, abyste se vyhnuli nepohodlí způsobenému vysokou počáteční teplotou.

INSTRUKCE PRO NÍZKOFREKVENČNÍ IMPULS

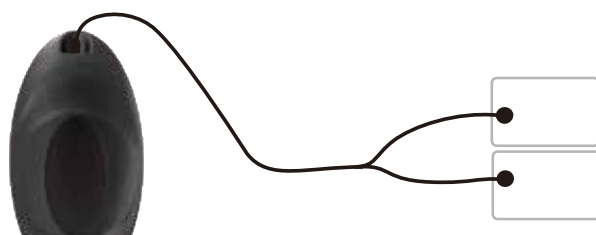

Tipy: Elektrická pulzní náplast je spotřební položka, prosím, zakupte si ji, pokud ji potřebujete použít.

Upozornění: Nepoužívejte funkci EMS a připojujte elektrody současně.



1. Zapojte kabel do výstupního portu elektrického pulsu zařízení, připojte náplast a odstraňte ochrannou fólii, aby se přilepila na místo, kde je potřeba masáž, jako jsou paže, nohy, pas atd.
2. Po použití připevňte ochranný papír na elektrickou pulzní náplast pro další použití.

PARAMETRY

NÁZEV	BEDERNÍ TRAKČNÍ ZAŘÍZENÍ
MATERIÁL	ABS + PC
PROUD	2A
VÝKON	24W
NAPĚTÍ	12V DC
CYKLUS	15 MINUT
FUNKCE	VZDUCHOVÁ TRAKCE, MASÁŽ, TOPENÍ, EMS
POUŽITELNOST	BOLEST V KŘÍŽÍCH, UVOLNĚNÍ SVALŮ

ZÁKLADNÍ DESKA

Jak používat

1. Základní deska musí být umístěna pod zařízením.
2. Deska byla navržena pro zlepšení celkového zážitku při použití trakčního zařízení na měkkém povrchu, jako je měkká postel, pohovka nebo pěnový polštář. (Viz obrázek 1)
3. Zařízení lze provozovat s deskou i bez ní, pokud je umístěno na tvrdém povrchu, např. na posteli nebo podlaze.
4. Nepoužívejte desku k jiným účelům, ani na ni nestoupejte.
5. Prosím upravte desku podle vaší osobní situace.



Síla bude mírná, když je zařízení položeno na straně A.

Síla bude větší, když je zařízení položeno na straně B.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

1. Používejte pouze adaptér, který byl dodán se zařízením.
2. Nenechte zařízení spadnout z výšky a neuchovávejte jej v blízkosti ostrých předmětů.
3. Nepoužívejte tento produkt během spánku.
4. Nepoužívejte jiné lékařské elektronické zařízení současně, jako jsou kardiostimulátory, kardiopulmonální stroje nebo elektrokardiografy, protože by to mohlo být nebezpečné. Pokud pacient současně používá vysokofrekvenční chirurgické vybavení nebo jiné lékařské vybavení, elektrické pulzní náplasti v zařízení mohou způsobit popáleniny nebo poškodit vybavení. Pokud je zařízení používáno v blízkosti mikrovlnné trouby, výstup zařízení se může stát nestabilním.
5. Poradte se se svým lékařem před použitím tohoto zařízení, zejména pokud jste těhotná, máte kožní abnormality, smyslové problémy, problémy s krevním tlakem, maligní nádory, cerebrovaskulární onemocnění, diabetes atd.
6. Uchovávejte mimo dosah dětí.
7. Při použití funkce elektrického pulzu neměňte ani neměňte pozici.

ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ

- Uchovávejte zařízení v suchém místě bez vlhkosti, když není v provozu.
- Neomotávejte napájecí kabel kolem zařízení.
- Nepoužívejte napájecí kabel jako rukojeť.
- Uchovávejte mimo dosah všech rozpouštědel a hrubých detergentů.
- Odpojte zařízení a nechte jej vychladnout před čištěním. Otřete měkkým suchým hadříkem podle potřeby.
- Nepotápějte zařízení do vody ani jiných kapalin.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, kartáče, benzín, petrolej, leštěnky na sklo/nábytek nebo ředidla na čištění maséra.