

Návod

Masážní pistole Jocca Relax



POPIS

- A. Hlavní tělo
- b. Tlačítko ON/OFF
- c. Ukazatel rychlosti
- d. Nabíjecí rozhraní
- e. Kulatá hlava
- h. Hlava ve tvaru U
- F. Plochá hlava
- G. Kuželová hlava





BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


- Tyto pokyny jsou velmi důležité, před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.
- JOCCA je odpovědná pouze za správné používání tohoto produktu, jak je popsáno v této příručce.
- Před prvním použitím zařízení vybalte a ověřte, že je v perfektním stavu, pokud ne, zařízení nepoužívejte a přejděte do JOCCA, protože záruka se vztahuje na všechny výrobní vady.
- Tento výrobek je vhodný pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení venku. Nenechávejte zařízení vystavené vnějším vlivům, jako je déšť, sníh, slunce atd.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo jsou vhodným a bezpečným způsobem poučeni o používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Jakékoli čištění a údržbu musí provádět uživatel, nebo pokud je provádí dítě od 8 let, musí být pod dozorem.
- Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
- Pokud váš spotřebič spadl nebo spadl do vody nebo jiné kapaliny, nepokoušejte se jej opravit. Kontaktujte oddělení technických služeb JOCCA.
- Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozeny, spotřebič nepoužívejte nebo se nepokoušejte kabel vyměnit sami. Kontaktujte zákaznický servis, kde vám jej správně vymění.
- Neponořujte spotřebič ani žádnou jeho část do vody nebo jiné kapaliny.
- Pro vaši bezpečnost a pro správnou funkci spotřebiče vždy používejte náhradní díly a příslušenství JOCCA.
- Stroj musí být používán výhradně k tomu, k čemu je navržen, a vždy se musí řídit pokyny v tomto návodu.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Před prvním použitím spotřebiče plně nabijte výrobek.
- Po dokončení nabíjení se indikátor rychlosti rozsvítí zeleně a zařízení lze používat po dobu 60-90 minut.
- Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko ON/OFF.
- Spotřebič se spustí na první rychlost a rozsvítí se první kontrolka indikující rychlost.
- Chcete-li změnit rychlost, stiskněte znovu tlačítko ON/OFF.
- Zařízení má 6 rychlostí:
 - Rychlost 1: 2000 RMP • Rychlost 2: 2200 RMP • Rychlost 3: 2400 RMP • Rychlost 4: 2600 RMP • Rychlost 5: 2800 RMP • Rychlost 6: 3000 RMP

Masážní hlavice a jejich funkce

-  Kulatá hlava je indikována pro oblasti: paže, záda, hýždě a nohy.
-  Plochá hlava je indikována k uvolnění a tvarování všech svalů.
-  Kuželová hlavice je indikována pro hluboké tkáně, jako jsou klouby, dlaň nebo plantární oblast.
-  Hlava ve tvaru U je indikována pro oblast krku, páteře a Achillovy šlachy.

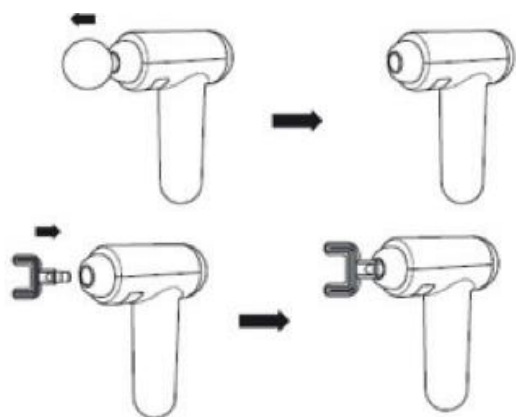


- Chcete-li vyměnit hlavu, jednoduše zatáhněte za hlavu a vyměňte ji za požadovanou.
- Chcete-li spotřebič vypnout, stiskněte a podržte tlačítko ZAP/VYP.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo prostředky, které by mohly spotřebič poškodit. Jednoduše očistěte povrch vlhkým hadříkem.
- Neponořujte přístroj do vody nebo jiné kapaliny.

TECHNICKÁ DATA

5V 1A (přes USB) 7,4V (Ion Lithio) Kapacita 1200 mAh

 Tento produkt je v souladu se směrnicemi 2014/35 / EU EMC, 2014/30 / EU LVD, 2011 /65 / EU ROHS

RECYKLACE PRODUKTU – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Nevyhazujte tento výrobek na konci jeho životnosti do koše. Odnešte jej do sběrný odpadu,
k tomuto účelu určené (v souladu se směrnicí 2012/96 / EU DEEE).

JAK VYJMOUT BATERIE:

Pokud výrobek obsahuje nějaké baterie, je nutné je před likvidací výrobku vyjmout. Postupujte podle kroků: Před vyjmutím se ujistěte, že jsou baterie zcela vybité. Po vyjmutí baterií musí být spotřebič odpojen od napájení.

- Při vyjímání baterií po skončení životního cyklu zařízení postupujte následovně:
- Otevřete přihrádku, předtím odstraňte upevňovací šrouby pomocí šroubováku.
- Identifikujte baterii a přestříhnete její kabely (červený a černý). Abyste se vyhnuli riziku zkratu s možným zbytkovým nabitím baterie, nejprve odřízněte červený kabel a chraňte jeho vodivou část izolační páskou, poté pokračujte v odříznutí černého kabelu stejným způsobem.
- Bezpečně vyjměte baterii. Pamatujte, že baterie musí být uloženy ve zvláštní autorizované firmě.