


Návod Masážní přístroj s infračerveným ohřevem InfraHeat Pro

Před použitím použijte malé množství vody k otření vodivé destičky nebo mokrý ručník k otření místa použití!

Konfigurace produktu

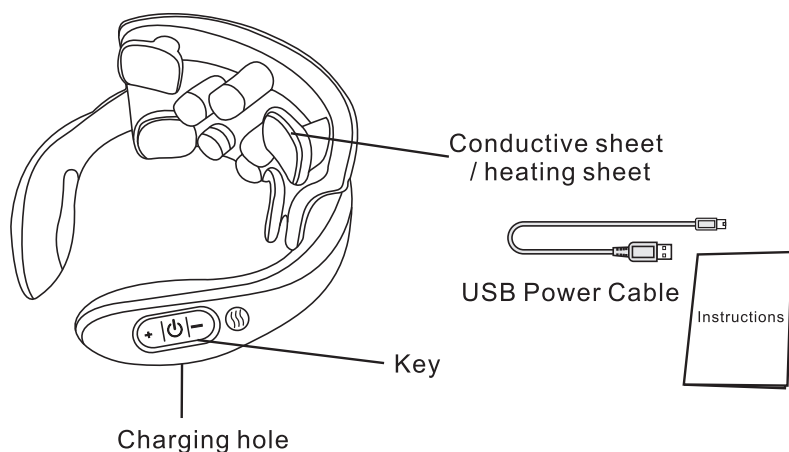

- Vodivá destička / topná destička
- USB napájecí kabel
- Nabíjecí otvor
- Tlačítko

Instrukce

Jmenovitý výkon: 4 W


Doba nabíjení: Přibližně 2–3 hodiny

Parametry nabíjení: 5 V == 1 A

Jmenovité napětí: 3,7 V ==

Jmenovitý čas: 15 min

Norma: GB47061-2005 / GB4706.10-2008

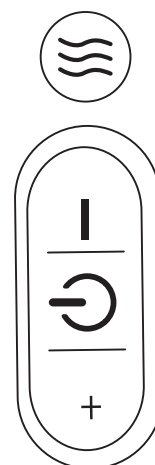

1. **Zapnutí / vypnutí:**
Podržením tlačítka napájení zapnete nebo vypnete masážní funkci.
2. **Režimy:**
Krátkým stiskem tlačítka režimu zapnete režim. Je celkem 6 režimů a při každém přepnutí zazní odpovídající zvuk.
3. **Zvýšení síly pulzu:**
Celkem 15 úrovní.
4. **Snížení síly pulzu:**
Celkem 15 úrovní. Při každém snížení zazní „poklesové pípnutí“.
5. **Nabíjení:**
Použijte nabíječku 5 V == 1 A. Červená kontrolka svítí při nabíjení a zhasne po úplném nabití. Pokud je energie nedostatečná, zařízení se automaticky vypne po 5 pípnutích. Prosím, nabijte včas.
6. **Ovládání ohřevu:**
Výchozí stav: ohřev je při zapnutí vypnutý.
Dlouhým stiskem tlačítka ohřev zapnete nebo vypnete.
7. **Ovládání vibrací:**
Dlouhým stiskem tlačítka vibrací zapnete nebo vypnete vibrační masáž.
Krátkým stiskem vybíráte masážní režim (celkem 4 režimy). Vibrační funkce je při spuštění výchozí.

Lidé, kteří by tento produkt neměli používat

1. Osoby, které se podrobují léčbě nebo mají zjevné fyzické potíže, by se měly před použitím poradit s lékařem.
2. Dohlížejte na děti, aby si s výrobkem nehrály.

3. Výrobek má horký povrch, proto by lidé, kteří jsou citliví na teplo, měli být při používání opatrní.
4. Pacienti s alergiemi, srdečními chorobami a lidé s elektronickými implantáty by měli produkt používat s opatrností.
5. Tento produkt není určen pro osoby (včetně dětí), které mají fyzické, smyslové nebo mentální omezení, nebo nedostatečné zkušenosti a znalosti, pokud na ně nedohlíží odpovědná osoba, která zajistí jejich bezpečné používání.

Řešení běžných problémů

Pokud během používání narazíte na problémy, postupujte podle následujících tipů a možných řešení:

Stav – Možná příčina / řešení

Nepracuje

- Ujistěte se, že je zařízení zapnuté.
- Zkontrolujte, zda má baterie dostatek energie.

Masáž se náhle zastavila

- Zkontrolujte, zda není baterie vybitá.
- Možná jste omylem stiskli tlačítko na dálkovém ovládání.
- Uplynulo 10 minut automatického časovače.
- Pokud problém přetrvává, přestaňte zařízení používat a kontaktujte servis.

Automatické vypnutí zařízení

- Pokud není v kontaktu s pokožkou, zařízení vydá zvuk a automaticky se vypne po 1 minutě.
- Když je nízká baterie, zařízení se automaticky vypne po 10 pípnutích. Nabijte zařízení.

Bezpečnostní pokyny

Při používání tohoto masážního produktu, zejména v přítomnosti dětí, dodržujte tato bezpečnostní opatření. Aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem nebo jiným nebezpečím, pečlivě si přečtěte všechny instrukce před použitím:

- Po použití vždy odpojte napájecí kabel a před čištěním vytáhněte zástrčku.
- Nepoužívejte během sprchování nebo koupání. Pokud zařízení spadne do vody, okamžitě jej odpojte.
- Nevkládejte zařízení do blízkosti vody, aby nemohlo spadnout do vany či umyvadla.
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, neponořujte do vody ani jiných tekutin.
- Nepoužívejte jehly nebo kovové předměty k opravě.
- Nepoužívejte neoriginální příslušenství.
- Nepoužívejte, pokud je poškozený obal zařízení nebo napájecí kabel.
- Pokud zařízení náhodně navlhne, nepoužívejte jej.
- Nepoužívejte, pokud jste opilí nebo se necítíte dobře.
- Nepoužívejte do jedné hodiny po jídle.
- Pokud máte poranění krku nebo jste po operaci, používejte pouze pod dohledem lékaře.
- Zařízení funguje na baterii. Pokud není nabitá nebo je baterie poškozená, okamžitě přestaňte používat.
- Při výměně baterie:
 - Otevřete kryt pomocí kladívka podél okraje, najděte baterii a odstříhněte vodiče nůžkami (opatrně!).
 - Před likvidací vždy vyjměte baterii.
 - Při odstraňování baterie musí být produkt odpojen od elektrické sítě.
 - Baterie musí být bezpečně zlikvidována.
- Pokud je výrobek stále ve vadném stavu nebo jej nelze používat, vypněte jej, odpojte ze zásuvky a kontaktujte naše servisní středisko.
- Uživatelé by tento produkt neměli sami rozebírat ani opravovat.
- Dotýkání se vnitřních částí může způsobit poruchy nebo úraz elektrickým proudem.
- Poškození produktu způsobené samostatným rozebráním nebo opravou zneplatní záruku a společnost nenese odpovědnost za jakékoli následky způsobené touto situací.