

Chytrý masážní přístroj na krční páteř Ipro


Návod




Děkujeme Vám za zakoupení našeho chytrého masážního přístroje na krční páteř s 4-jádrovým konektorem. Prosím, přečtěte si pečlivě tento uživatelský manuál před použitím a uchovejte jej pro budoucí použití.

SLOŽENÍ PRODUKTU


- **Hlavní jednotka**

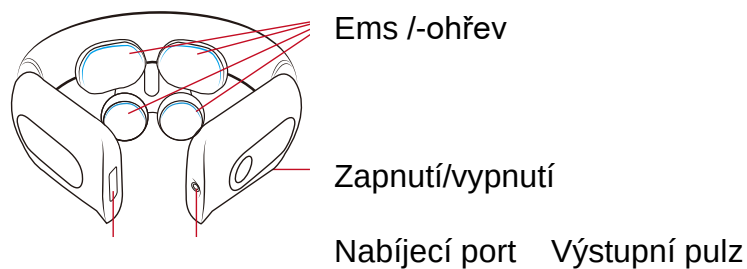

- **Dálkový ovladač**

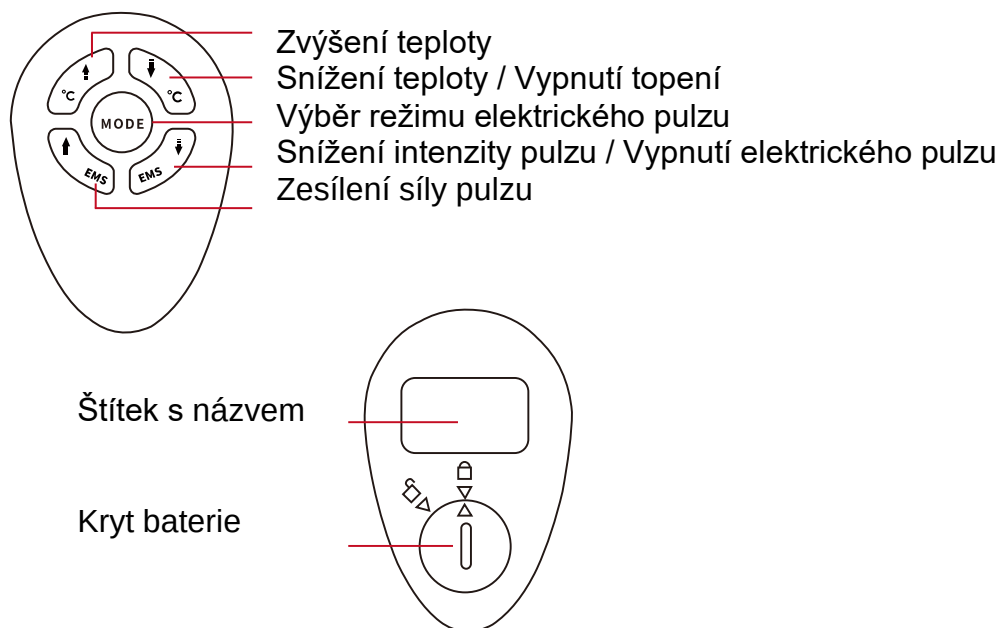

PŘÍSLUŠENSTVÍ

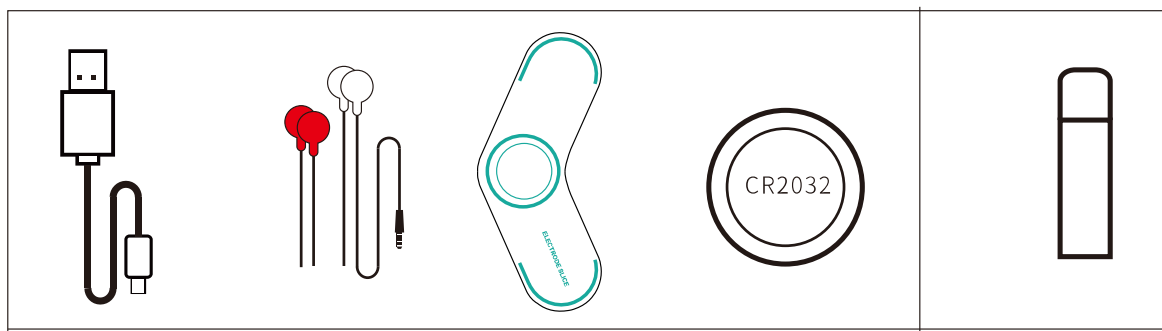


- Nabíjecí kabel
- EMS kabel
- Elektrody (2 ks)
- Náhradní baterie (1)
- Sprejová láhev


Elektrody jsou spotřební položky, pokud budete potřebovat více, zakupte si je. Sprejová láhev a sluchátka jsou dárčky a nejsou součástí produktu. Dárčky se mohou lišit od skutečného produktu.

INSTRUKCE


1. **Navlhčete pokožku na krku** mokrým ručníkem nebo sprejovou lahví před použitím. Poté si masážní přístroj správně nasadíte kolem krku, jak je znázorněno na obrázcích níže.

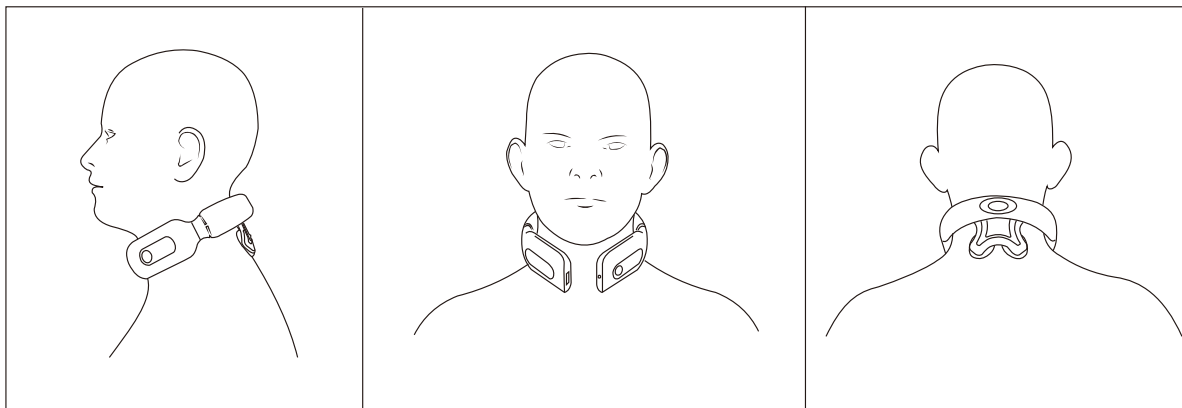

2. **Stiskněte a podržte tlačítko "⏻"** na hlavní jednotce, abyste ji zapnuli. Po zapnutí uslyšíte jedno pípnutí a rozsvítí se indikátor napájení.

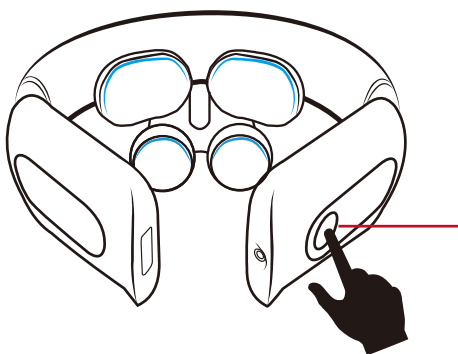

PROVOZ ELEKTRICKÉHO PULZU

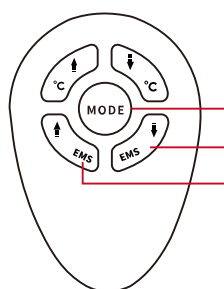


EMS REŽIM
Zvýšení EMS
Snížení EMS

3. Ve stavu zapnutí stiskněte **MODE** pro zapnutí masážního režimu 1. Druhé stisknutí zapne masážní režim 2. Třetí stisknutí zapne masážní režim 3. Čtvrté stisknutí zapne spací masáž. Každé stisknutí tlačítka **↑EMS** - znamená, že intenzita se zvýší o jeden stupeň. Při každém stisknutí tlačítka **↓EMS** zazní „pípnutí“, což znamená, že se intenzita zvýšila nebo snížila. Intenzitu lze zvýšit

nebo snížit až na maximální nebo minimální úroveň. Při dosažení maximální nebo minimální intenzity začne hlavní jednotka pípat, což znamená, že tlačítka nejsou v tuto chvíli platná.


PROVOZ TOPENÍ

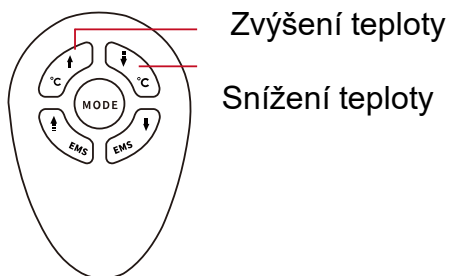

4. Stiskněte tlačítko $\uparrow^{\circ\text{C}}$ na dálkovém ovladači, když je zařízení zapnuté, zazní „pípnutí“, což znamená, že teplota se zvýšila o jeden stupeň. Při stisknutí tlačítka $\downarrow^{\circ\text{C}}$ na dálkovém ovladači zazní „pípnutí“, což znamená, že se teplota snížila o jeden stupeň. Teplotní rozsah je od 38 do 43 °C. Když se teplota zvýší na maximum, nelze ji dále zvýšit. Když se teplota sníží na minimum, hlavní jednotka začne pípat, což znamená, že tlačítka nejsou v tuto chvíli platná.

DALŠÍ MASÁŽ

Použití silikonových elektrod

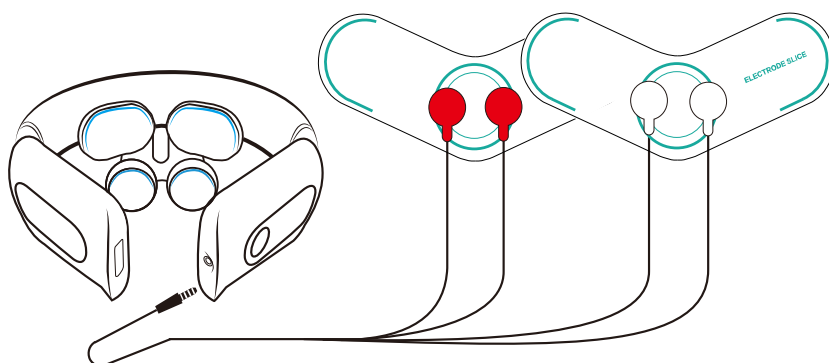

Zasuňte jeden konec 2-jádrového vodiče do portu elektrody a druhý konec připojte k elektrodám, poté použijte masážní přístroj podle uvedených pokynů.

Při použití elektrod se pocit EMS hlavy nebude výrazně projevovat. Doporučuje se ignorovat EMS masáž při použití elektrod.


1. **Pozor:**

Při používání by měl být krk bez překážek (na pokožce).

Elektrody by měly být na svém povrchu čisté. Pokud jejich povrch znečistí, umyjte je vodou a poté řádně osušte.

Elektrody jsou spotřební položky. Pokud jejich přilnavost nemůže být obnovena po několika vyčištěních, zvažte zakoupení nových.

Elektrody můžete umístit na tělo podle obrázků níže:

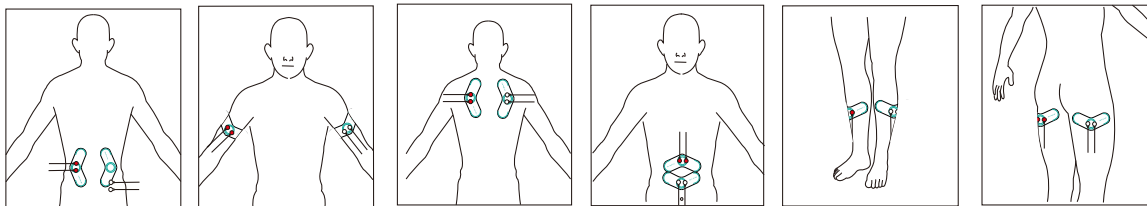

Bederní oblast

Paže

Rameno

Břicho

Noha

Boky

PRINCIP ELEKTRICKÉ STIMULACE SVALŮ

Elektrická stimulace svalů (EMS), známá také jako neuromuskulární elektrická stimulace (NMES), je vyvolání svalové kontrakce pomocí elektrických impulsů.

Výhody utírání nebo stříkání vody v kontaktní oblasti:
Vzhledem k vlastnostem impulsů může suchá pokožka nebo počasí ovlivnit efekt impulsů. Stejně jako u lékařských ultrazvukových přístrojů voda zvlhčuje pokožku a zajišťuje lepší přenos elektrických impulsů. Otírání nebo stříkání vody v kontaktní oblasti vám zajistí lepší pocit z různých masážních režimů a přinese vám dokonalý zážitek.

Malé tipy:


1. Nastříkejte konektory nebo svůj krk, nasadte zařízení kolem krku a ujistěte se, že jsou všechny čtyři konektory plně připojené k pokožce. Pokud není pokožka dostatečně navlhčená, můžete se cítit nepříjemně.
2. Zapněte EMS a pomalu zvyšujte intenzitu na pohodlnou úroveň.
3. **Nezvyšujte intenzitu nad rámec toho, co je pohodlné**, pokud používáte EMS zařízení poprvé.
4. **Režim A** je pohodlný režim, **Režim B** je intenzivní režim. Vyberte režim podle potřeby.
Pohodlí je nejdůležitější.

JAK POUŽÍVAT STŘÍKACÍ LÁHEV

1. **Otevřete víčko**
2. **Naplňte stříkací láhev vodou až po maximální rysku nebo kontaktní oblast**
3. **Nasadte zařízení kolem krku a použijte stříkací láhev na kontaktní oblast nebo konektory**


JAK NABÍJET MASÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ

Symbol  bude blikat, když je masážní zařízení v nízkém stavu baterie, použijte USB kabel k nabití a symbol  se změní na červený blikající. Symbol  se změní na červený, když je plně nabitý. Používejte nabíječku 5A-1A/2A, kterou lze použít k nabití mobilního telefonu.

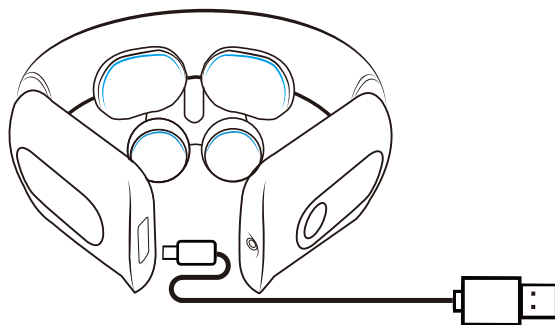

INSTALACE BATERIE CR2032 DO OVLADAČE

1. Použijte přiloženou kulatou destičku k otočení krytu proti směru hodinových ručiček a otevření krytu.
2. Vložte článkovou baterii do ovladače. Pozitivní strana by měla směřovat nahoru.
3. Otočte kryt ve směru hodinových ručiček, abyste kryt zavřeli.

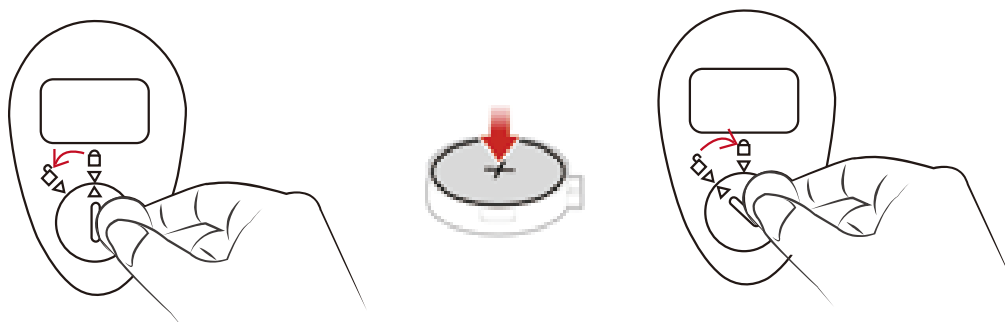

POZNÁMKY PŘED POUŽITÍM *Prosím, přečtěte si pečlivě následující poznámky:*

1. Nepoužívejte tento produkt během spánku.
2. Nepoužívejte jej s jinými lékařskými elektronickými přístroji nebo elektronickými zařízeními, která udržují životní funkce, jako jsou kardiostimulátory, lékařské elektronické přístroje, jako jsou elektrokardiografy. Jinak může dojít k nebezpečí. Pokud pacient používá jak vysokofrekvenční chirurgické vybavení, tak toto zařízení, elektrické pulzní podložky tohoto zařízení mohou způsobit popáleniny a/nebo poškodit toto zařízení; pokud se zařízení používá v blízkosti krátkovlnného nebo mikrovlnného terapeutického přístroje, výstup zařízení nemusí být spolehlivý.
3. Nepoužívejte pro děti nebo osoby bez vědomí.
4. Při použití funkce elektrického pulzu nelze produkt přesouvat nebo náhle měnit jeho směr. Měl by být vypnut a znovu zapnut, jinak dojde k silnému podráždění.
5. Doporučuje se nastavit těsnost elektrického pulzu podle osobního pohodlí. Vyšší intenzita nemusí zvyšovat pohodlí masáže, naopak vysoká síla může způsobit pocit mravenčení.
6. Z důvodu hygieny se před použitím zařízení důkladně očištěte. Při používání funkce EMS by měly být elektrody těsně připojeny k pokožce a měly by se vyhnout kontaktu s ránami.
7. Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Nerozebírejte, nemodifikujte, nevhazujte produkt ani baterii do ohně. Jinak by mohlo dojít k poškození nebo výbuchu.

POUŽITÍ PRODUKTU JE ZAKÁZÁNO ZA NÁSLEDUJÍCÍCH OKOLNOSTÍ:

1. Srdeční nebo mozkové onemocnění
2. Nošení kardiostimulátoru
3. Osteoporóza nebo cukrovka
4. Těhotenství
5. Zhoubný nádor
6. Alergie na kov
7. Lékařská léčba
8. Prosím, kontaktujte svého lékaře, pokud se po použití zařízení cítíte nepříjemně

POKYNY PRO LIKVIDACI ODPADU PRODUKTU

Prosím, podpořte recyklaci nabíjecích baterií (lithium-iontových baterií)

Nebezpečí

- Tento produkt používá speciální dobíjecí baterii a nesmí být používán v jiných produktech. Nepoužívejte k nabíjení tohoto produktu jiné nabíječky.
- **Nehazujte do ohně a vyhněte se:**
- Mechanickému poškození (např. velká zátěž, náraz nebo pád).
- Přímému kontaktu baterie s kovem, který způsobí zkrat.
- Nerozebírejte baterii sami.
- Výše uvedená situace může způsobit přehřátí, požár, roztržení nebo poškození.

Varování

- Uchovávejte použité baterie mimo dosah kojenců a dětí.
- Pokud jsou baterie náhodně spolknuty, kontaktujte nemocnici pro okamžitou pomoc.
- Při manipulaci s použitými bateriemi se vyhněte úniku kapaliny na ruce.
- Při úniku baterií si okamžitě umyjte ruce vodou. Pokud se kapalina dostane do kontaktu s očima, neotírejte je. Vypláchněte je velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Po skončení životnosti zařízení baterii vyjměte a recyklujte.
- Nesprávná likvidace nebo recyklace může způsobit požár, výbuch a/nebo poškození životního prostředí. Pokud si nejste jisti metodami likvidace, kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Pokud narazíte na problémy při používání produktu, obraťte se na následující tipy a řešení.

Otázky	Možná příčina / řešení
Nepracuje po zapnutí	Interní baterie je vybitá / dálkový ovladač není zapnutý nebo je vybitý
Při nabíjení nesvíí kontrolka	Zkontrolujte, zda je USB kabel, hlavní jednotka, dálkový ovladač a napájecí adaptér správně připojen; vyměňte adaptér nebo kabel a zkuste to znovu.
Zařízení funguje, ale nejsou jasné nebo impulsní zprávy	1. Zkontrolujte, zda jsou elektrody v přímém kontaktu s pokožkou.

Otázky		Možná příčina / řešení
Pocit mravenčení při použití		2. Zkontrolujte, zda je intenzita pulzní masáže nastavena nad úroveň 1.
		3. Zkontrolujte, zda vlasy nebo cizí předmět mezi elektrodami a pokožkou neovlivňují připojení.
		4. Pokud zařízení nepracuje správně, automaticky se vypne pulzní funkce. Upravte nastavení a zkuste to znovu.
		1. Zkontrolujte, zda jsou elektrody pevně připojené k pokožce.
Displej se nezobrazuje		2. Síla masáže je příliš vysoká, upravte ji na pohodlnější úroveň.
		3. Zkontrolujte, zda nejsou problémy s pokožkou, umyjte ji vodou a poté zařízení znovu použijte.
		Displej se automaticky vypne po 15 sekundách, stiskněte aktivační tlačítko pro opětovné zapnutí.
Dotykové tlačítko nefunguje		Některé kovové předměty jsou příliš blízko. Pokud selže, stiskněte tlačítka postupně. Dotykové tlačítko nefunguje současně s dotykem na jiná tlačítka.
Tlačítko topení je zapnuto, ale není žádné teplo		Zkontrolujte, zda není nastavení teploty příliš nízké. Keramický ovládací signál může být narušen; zkuste znovu několikrát.

PARAMETRY

| Napájení hlavní jednotky | 5V |

| Lithiová baterie hlavní jednotky | 3,7V = 2000mAh |

| Nabíjecí napětí hlavní jednotky | 5V |

| Lithiová baterie dálkového ovladače | 3V |

| Nabíjecí napětí ovladače | 5V |