

NÁVOD K POUŽITÍ

Fasciální masážní pistole 16 hlav PulsePro




Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtete tento manuál a uložte jej pro pozdější potřebu.

Série 16 hlav

1. **Zapnutí:** Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí → na displeji se zobrazí 00 a krátce poté začne pistole pracovat.
2. **Vypnutí:** Když je zařízení v provozu, stiskněte tlačítko zapnutí, aby se zastavilo.
3. **Přepínání režimů:** Po zapnutí krátce stiskněte tlačítko režimu pro přepnutí mezi jednotlivými režimy. Jsou zde tři režimy a při přepnutí se na displeji zobrazí F1, F2 a F3.
4. **Dlouhé stisknutí: Rychlé zvýšení intenzity.**
 - Po stisknutí tlačítka + se intenzita rychle zvyšuje o jeden stupeň až do úrovně 30.
 - Displej zobrazuje úroveň 1–30.
5. **Dlouhé stisknutí: Rychlé snížení intenzity.**
 - Po stisknutí tlačítka – se intenzita rychle snižuje o jeden stupeň, minimálně na úroveň 0.
 - Displej zobrazuje úroveň 1–30.

Upozornění: Zařízení se automaticky vypne po 15 minutách provozu.

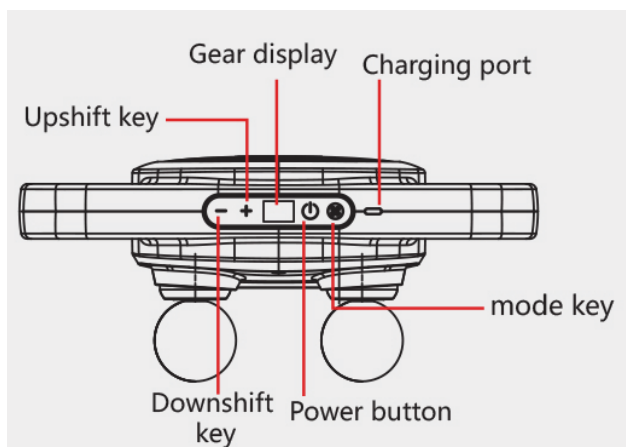

(schéma ovládání)

- **Uplift key** – tlačítko pro zvýšení intenzity
- **Downshift key** – tlačítko pro snížení intenzity
- **Mode key** – tlačítko pro přepínání režimů
- **Power button** – tlačítko napájení
- **Gear display** – zobrazení úrovně intenzity
- **Charging port** – nabíjecí port

Parametry produktu

- **Jmenovité napětí:** 11,1 V
- **Nabíjecí proud:** 2 A
- **Jmenovitý výkon:** 35 W
- **Nabíjecí napětí:** 5 V

Pokud jej chcete znovu použít, prosím stiskněte a podržte tlačítko napájení pro opětovné zapnutí.

Pokyny pro údržbu

1. Pokud se výrobek nepoužívá delší dobu, udržujte určitou úroveň nabití, vypněte napájení a správně zařízení uložte. Může být uschováno v originální krabici na suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.
2. Pokud se výrobek delší dobu nepoužívá, doporučuje se baterii pravidelně dobíjet, aby nedošlo k jejímu hlubokému vybití. To může baterii poškodit a zkrátit její životnost.
3. Při používání zařízení věnujte pozornost jeho zahřívání. Pokud se během použití výrazně zahřeje, počkejte alespoň 30 minut, než bude znovu použitelný.
4. Nepoužívejte žádný organický čisticí prostředek nebo rozpouštědlo k čištění povrchu zařízení. K čištění postačí suchá tkanina. Zařízení neponořujte do vody.
5. Před uložením nebo čištěním zařízení vždy vypněte napájení.
6. Při přepravě musí být výrobek dobře zajištěn, aby se zabránilo vibracím, nárazům, kolizím a pádu.

Pokyny pro používání baterie

7. Baterie se nabíjí přibližně 2 hodiny, dokud není plně nabitá, poté lze zařízení používat. Doporučuje se používat pouze originální nabíječku z výroby.
8. Nabíjecí port je DC 3,5 mm. Tento výrobek používá standardní nabíjení pod 5 V (USB nabíječka telefonu).
9. Pokud je baterie nízká, malá dioda na spodní části zařízení bude blikat.
10. Během nabíjení se na displeji rozsvítí červené světlo.
11. Po úplném nabití se rozsvítí zelené světlo.
12. Doba nabíjení je přibližně 2 hodiny.
13. Když je zařízení zapnuté a funguje, displej ukazuje aktuální stav nabití.
14. Symbol „F“ označuje, že je stroj spuštěn. Když je zobrazeno „F0“, můžete zařízení bezpečně začít používat.

Poznámka: Během nabíjení je zakázáno masážní pistoli používat.

Poznámky (důležitá upozornění)

1. Zařízení nemohou používat osoby příliš slabé, malé děti nebo osoby s vážnými onemocněními.

2. Nepoužívejte na hlavě, kolenou nebo jiných kostních výstupcích.
3. Pokud při používání vznikne bolest, okamžitě přestaňte.
4. Nenechávejte zařízení bez dozoru, zejména v přítomnosti dětí.
5. Osoby se srdečními chorobami, s kardiostimulátorem nebo jinými implantáty nesmí zařízení používat.
6. Nepoužívejte během spánku.
7. Nepoužívejte zařízení blízko otevřeného ohně nebo zdrojů tepla.
8. Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí (koupena, sauna).
9. Nepoužívejte po dobu delší než 30 minut v kuse.
10. Pokud je zařízení poškozené nebo nefunguje správně, nepokoušejte se jej sami opravit.
11. Nepoužívejte poblíž citlivých částí těla, jako jsou oči nebo uši.
12. Nepoužívejte na oteklé nebo zanícené oblasti.
13. Nepoužívejte na zvířatech.
14. Pokud máte horečku nebo jste nemocní, zařízení nepoužívejte.
15. Nepoužívejte během řízení nebo chůze.
16. Nepoužívejte během těhotenství.
17. Pokud se během používání objeví závratě, okamžitě přestaňte.
18. Zařízení nepoužívejte pod přikrývkou nebo během odpočinku.
19. Před použitím si přečtěte celý návod.
20. Pokud se zařízení neobvykle chová, přestaňte jej používat a kontaktujte servis.

Odstraňování provozních problémů

Projev	Řešení problému
Zařízení nefunguje	Zkontrolujte, zda je baterie dostatečně nabitá. Zkuste zařízení znovu zapnout po úplném nabití.
Mírný neobvyklý hluk během použití	Nové zařízení může mít během záběhu mírný provozní hluk – je to normální. Pokud je hluk výrazný nebo neobvyklý, obraťte se na servis.
Baterii nelze nabít	Může být způsobeno stárnutím baterie nebo špatným kontaktem. Kontaktujte zákaznický servis nebo prodejce.

Kroky pro demontáž baterie při likvidaci zařízení

(Předpokládám, že instrukce budou na další stránce — můžeš ji nahrát a přeložím ji také.)

1. Vytáhněte masážní hlavici na pozici 1, jak je znázorněno na obrázku.
2. Pomocí šroubováku odstraňte 12 šroubů na pozici 2 podle diagramu a otevřete horní a spodní kryt zařízení.
3. Pomocí šroubováku odstraňte 4 šrouby na pozici 3 podle diagramu a sejměte kryt baterie.
4. Najděte kabel baterie, odpojte jej, vyjměte baterii a zlikvidujte ji podle platných předpisů.

Před likvidací zařízení musí být baterie vyjmuta a správně roztříděna.

Aby se snížilo riziko poruchy, úrazu elektrickým proudem, zranění, požáru, smrti nebo poškození zařízení, přečtěte si prosím všechny pokyny a upozornění v tomto návodu před použitím výrobku.

- Před likvidací musí být baterie z výrobku vyjmuta.
- Při vyjímání baterie musí být zařízení vypnuto.
- Baterie musí být likvidovány bezpečným způsobem.

Děkujeme za zakoupení našich produktů

Aby bylo zajištěno bezpečné a spolehlivé používání výrobku, prosím přečtěte si všechny pokyny a bezpečnostní informace v tomto návodu.