

# **Návod k použití**



## **Masážní přístroj na krk a ramena**



## Popis produktu

Zařízení pro péči o krční páteř poskytuje **dynamické protahování krku, dekompresi ramen, světelnou terapii a tepelnou terapii**. Pomáhá udržovat správnou fyziologickou polohu tím, že vytváří pohodlnou oporu pro krk. Je vhodné pro různé uživatele a ideální pro domácí použití.

*Doporučeno pro osoby s nepohodlím v oblasti krku nebo pro ty, kteří chtějí zmírnit únavu.*

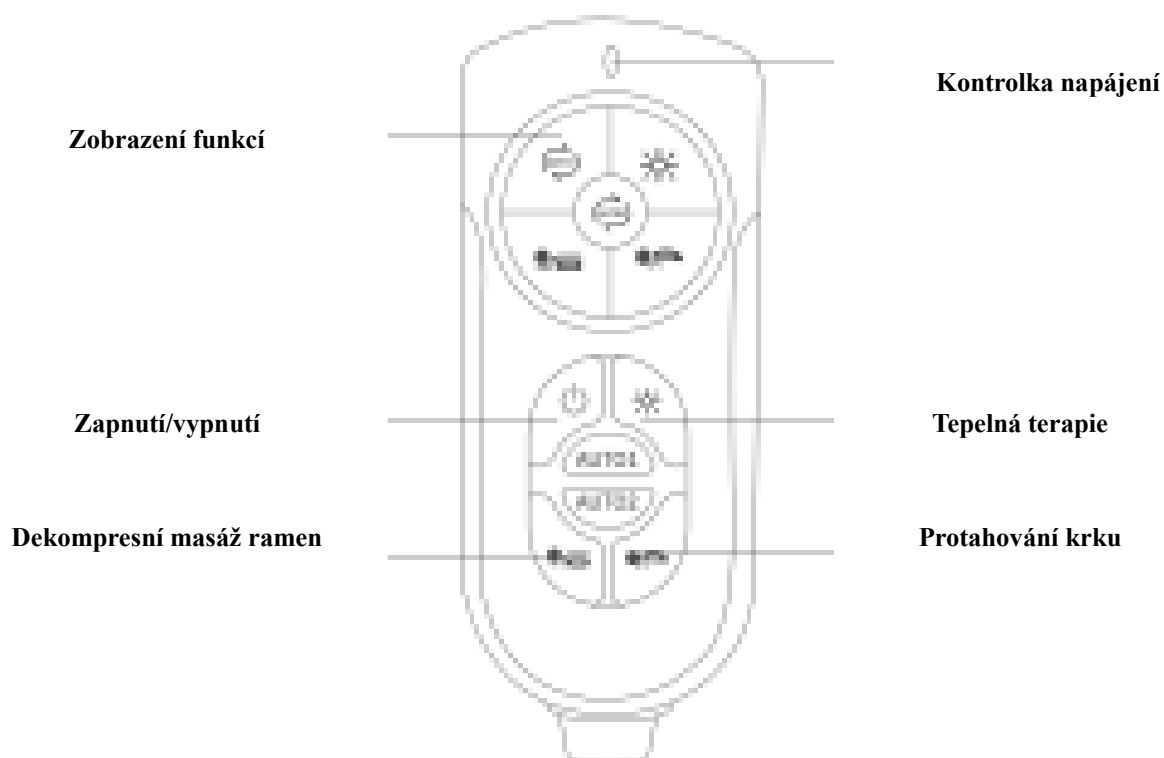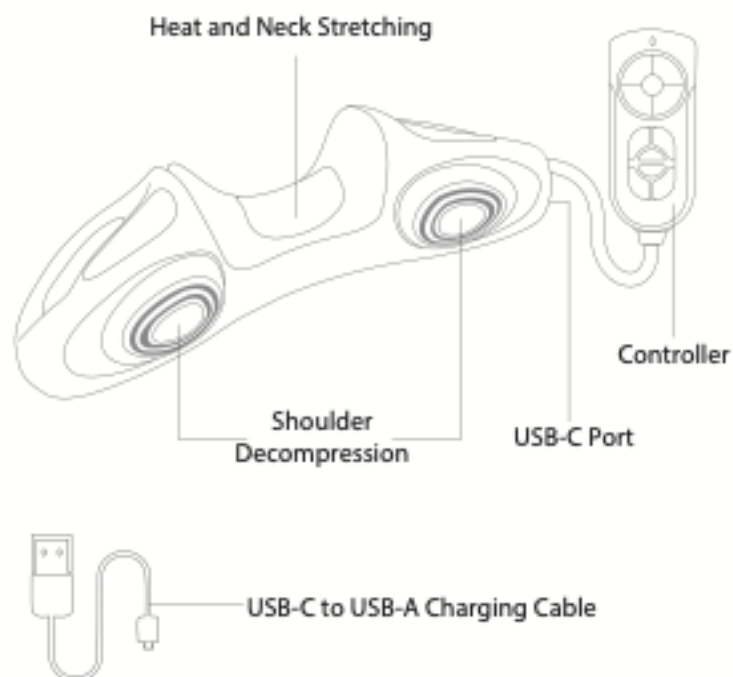

## Jak nabíjet

1. Připojte konec USB-C nabíjecího kabelu do portu zařízení.
2. Druhý konec USB-A zapojte do napájecího adaptéru (není součástí balení).
3. Adaptér vložte do elektrické zásuvky.
  - Kontrolka rychle bliká při nabíjení.
4. Po úplném nabití zařízení odpojte.

## Poznámka:

- Kontrolka bliká pomalu, když je baterie vybitá.
- Kontrolka bliká rychle během nabíjení.
- Kontrolka přestane blikat po úplném nabití.

## Ovládání funkcí

- **Zapnutí/vypnutí:** Podržte tlačítko, dokud neuslyšíte pípnutí.
- **Tepelná terapie:** Jedním stiskem se zapne nízká teplota (bílé světlo), dalším vyšší teplota (zelené světlo), třetím se vypne.
- **Dekompresní masáž ramen:** Stiskněte tlačítko pro spuštění, dalším stiskem přepínáte 2 režimy nebo vypnete.
- **Protahování krku:** Stiskněte tlačítko pro spuštění, dalším stiskem přepínáte 2 režimy nebo vypnete.
- **Automatické režimy (Auto 1/Auto 2):** Kombinují dekompresi ramen a protahování krku. Vyberte si pohodlný režim. Tepelná terapie může běžet současně.

## Důležité upozornění

- Zařízení nenechávejte spadnout ani vystavit ostrým předmětům.
- Nepoužívejte během spánku.
- Nepoužívejte spolu s jinými elektronickými zdravotnickými pomůckami (např. kardiostimulátorem).
- Před použitím se poraďte s lékařem, zejména pokud jste těhotná, máte srdeční onemocnění, problémy s tlakem, nádory, cévní choroby, cukrovku apod.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Před použitím odstraňte z krku kovové předměty.

## Upozornění k baterii

- Vestavěná baterie není vyměnitelná.
- Hrozí nebezpečí požáru nebo poranění při nesprávném používání.
- Nerozebírejte, nemačkejte ani nevystavujte ohni.
- Nevystavujte extrémním teplotám, vlhkosti ani přímému slunci.
- Nabíjejte pouze dodaným kabelem.
- Přestaňte nabíjet, pokud se baterie nadměrně zahřívá, nafukuje, kouří nebo vydává zápach.
- Poškozené nabíječky nepoužívejte.
- Baterii likvidujte dle platných předpisů.

## Čištění a údržba

- Neomývejte vodou.
- Prach setřete měkkým suchým hadříkem.
- Skvrny otřete měkkým vlhkým hadříkem, nepoužívejte silné čisticí prostředky.
- Uchovávejte na suchém, dobře větraném místě mimo přímé slunce a vlhkost.
- Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný servis.

## SPRÁVNÉ POUŽITÍ

Pro správné používání zařízení se prosím podívejte na níže uvedený diagram. Na spodní část produktu můžete umístit plochý, pevný předmět, který jej podepře (knihy atd.).



Správné používání



Nesprávné používání

### Specifikace

- Výstup: 7,4 V
- Výkon: 7,5 W
- Nabíjecí napětí: 5 V
- Nabíjecí proud: 2 A
- Kapacita baterie: 3000 mAh

### Obsah balení

- Hlavní jednotka (1 ks)
- USB-C na USB-A kabel (1 ks)
- Uživatelský manuál (1 ks)