


Návod

7barevná LED maska s infračerveným a červeným světlem

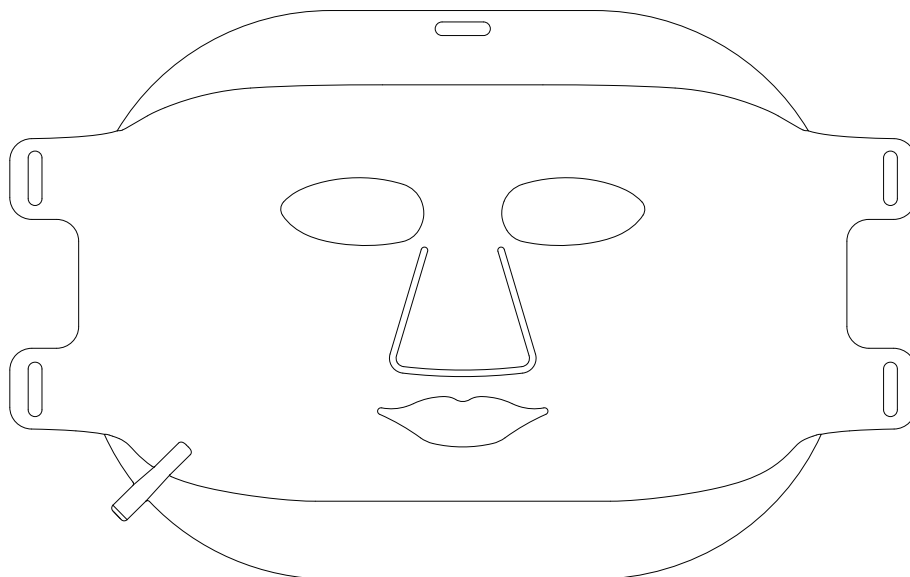

Přečtěte si prosím celý tento manuál před použitím

Děkujeme, že jste zakoupili spektrální masku pro omlazení pleti.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům, abyste mohli masku používat správně a bezpečně.

Tento manuál poskytuje uživatelům bezpečné a efektivní způsoby používání.

Po přečtení jej prosím uschovejte pro budoucí potřebu.

Obsah


- **Technologický úvod / seznam produktů**
- **Ovladač**
- **Rychlý návod k použití**
- **Použití / nevhodné skupiny osob**
- **Specifikace produktu / řešení problémů**
- **Záruční karta**

Technologický úvod

Tento produkt využívá světlo-vodičovou technologii založenou na nanotechnologii k vytváření různých nanometrových jednotek barevného LED světla.


K dispozici jsou tyto světelné barvy:

Červené světlo, Modré světlo, Oranžové světlo, Fialové světlo, Tyrkysové světlo, Zelené světlo, Bílé světlo.

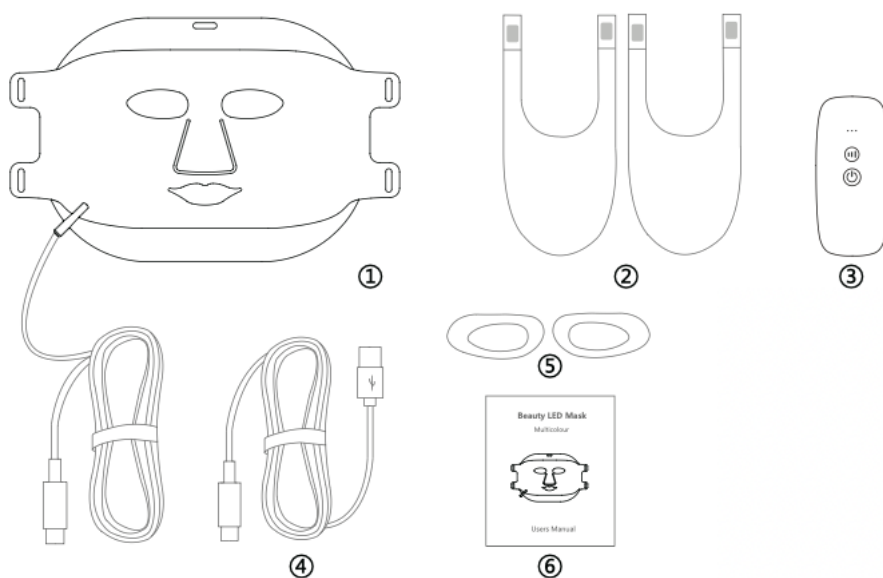


Seznam produktu

- 1 Obličejová LED maska × 1
- 2 Pásky / popruhy × 2
- 3 Ovladač × 1
- 4 USB kabel × 1
- 5 Ochranné oční krytky × 2
- 6 Uživatelský manuál × 1

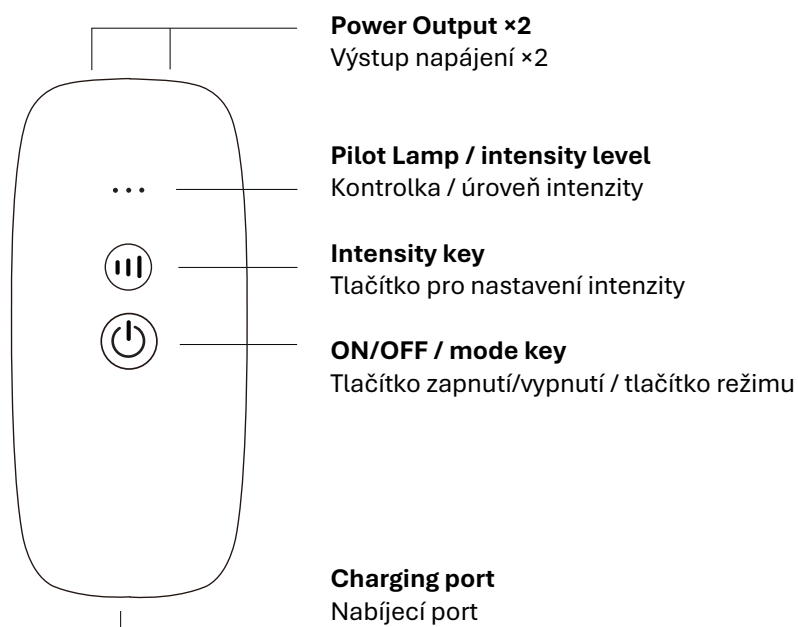


**Krok 1:**

Odstraňte make-up a vyčistěte si obličej.

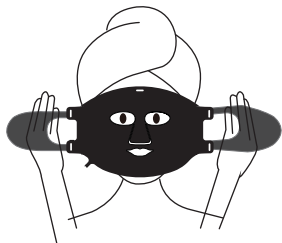**Krok 2:**

Použijte masku společně s pleťovou maskou nebo sérem.
Připevněte zařízení k hlavě pomocí suchých zipů (velcro pásků).

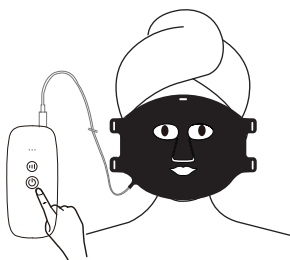**Krok 3:**

Podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, aby se zařízení zapnulo.
Pracuje automaticky po dobu 21 minut.

**Krok 4:**

Sejměte masku a naneste na pleť hydratační krém.

Používání**Zapnutí / vypnutí**

Dlouhým stisknutím tlačítka po dobu 3 sekund zařízení zapnete nebo vypnete.

Automatický režim

Výchozím režimem po zapnutí je automatický režim. Program postupně automaticky zapne:

- červené světlo na 3 minuty
- modré světlo na 3 minuty
- oranžové světlo na 3 minuty
- fialové světlo na 3 minuty
- tyrkysové světlo na 3 minuty
- zelené světlo na 3 minuty
- bílé světlo na 3 minuty

Poté se zařízení automaticky vypne.

Manuální režim

V pracovním režimu krátce stiskněte tlačítko funkce pro přepnutí mezi jednotlivými světly.
Vybrané světlo svítí 10 minut a poté se automaticky vypne.

Nastavení intenzity

V pracovním režimu krátce stiskněte tlačítko **intensity** pro úpravu intenzity.
K dispozici jsou **tři úrovně intenzity**.

Nabíjení

- Pokud kontrolka bliká, zařízení je v režimu nízké energie a je nutné jej dobít.
- Během nabíjení svítí kontrolka červeně.
- Po úplném nabití svítí všechny červené kontrolky trvale.

Použití

Doporučuje se používat masku pro omlazení pleti **3–5× týdně**.

Osoby nevhodné k použití

1. Tento produkt nemá funkci nehořlavosti — uchovávejte jej mimo oheň a korozivní kapaliny.
2. Nerozebírejte ani neopravujte tento produkt sami.
3. Uchovávejte mimo dosah dětí.
4. Tento produkt má vodotěsnou funkci.
5. Nestlačujte jej, abyste předešli deformaci nebo poškození.

Specifikace produktu

Název produktu	LED Beauty Mask (LED kosmetická maska)	
Pracovní napětí	3.7V	
Nabíjecí napětí	DC 5V = 1A	
Jmenovitý výkon	9.7W	
Počet LED diod	62 ks	
Rozměry produktu	328 × 209 × 5 mm	
Čistá hmotnost	≈ 260 g	
Vlnové délky	Červené, Modré, Oranžové, Fialové, Tyrkysové, Zelené, Bílé světlo	
Kapacita baterie	1000 mAh	
Materiál	Silikon, ABS	
Příslušenství	Maska, Ovladač, Pásky, USB kabel, Oční krytky, Uživatelský manuál	

Řešení problémů

Problém	Řešení
Zařízení nelze zapnout	Podržte tlačítko ON/OFF po dobu 3 sekundZařízení je nutné nabít
Nízké napětí baterie	Zařízení je nutné nabít
USB zástrčka / port nefunguje	Znovu zapojte USBVyměňte USB kabel nebo port
Automatické vypnutí	Podržte ON/OFF tlačítko 3 sekundy pro zapnutíZařízení je nutné nabít