

MASÁŽNÍ PODLOŽKA S FUNKCÍ INFRAČERVENÉ TERAPIE JOCCA



Návod



Děkujeme za důvěru věnovanou nákupu našeho produktu a jsme si jisti, že s kterýmkoli z našich produktů budete vždy spokojeni.

POPIS

- a - Masážní matrace
- b - Masážní motory
- c - Skladovací proužky
- d - Masážní dálkové ovládání
- e - Konektor pro adaptér
- f - Adaptér CA/CC

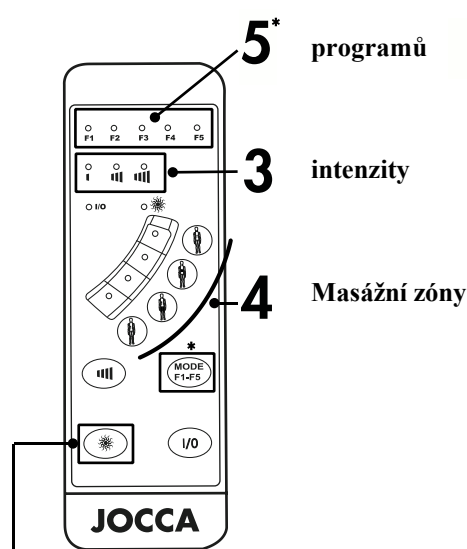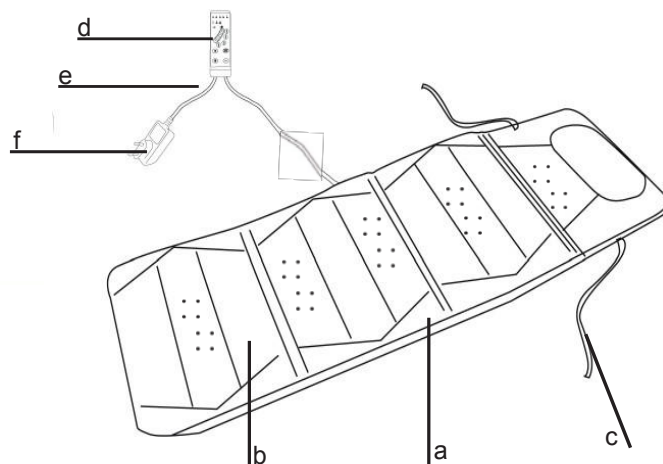




Infračervená funkce

DŮLEŽITÉ POKYNY

- Tyto pokyny jsou velmi důležité. Před použitím spotřebiče si pozorně přečtete tento návod k použití a mějte jej po ruce, abyste do něj mohli kdykoli nahlédnout.
- JOCCA odmítá jakoukoli odpovědnost za nesprávné použití produktu nebo jakékoli jiné použití, které není popsáno v této příručce.
- Před prvním použitím výrobku rozbalte výrobek a zkontrolujte, zda je v bezvadném stavu. Pokud ne, nepoužívejte zařízení a kontaktujte společnost JOCCA, protože záruka pokrývá jakékoli poškození způsobené původem nebo výrobní vady.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte spotřebič venku. Nikdy nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh, slunce atd.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou vhodným a bezpečným způsobem poučeny o používání spotřebiče a rozumí související nebezpečí. Jakékoli čištění a údržbu musí provádět uživatel, nebo pokud je provádí dítě od 8 let, musí být pod dozorem.
- Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
- Pamatujte, že tento produkt nebyl vynalezen proto, aby léčil, ale poskytoval relaxaci.
- Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte, zda je kabel a zástrčka v perfektním stavu. Zkontrolujte také, zda napětí uvedené na spotřebiči platí pro vaši elektrickou instalaci. Zapojte do zásuvky s uzemněním.
- Pokud zjistíte, že je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená, nepoužívejte spotřebič nebo se pokuste kabel vyměnit sami. Obráťte se přímo na autorizovaný technický servis JOCCA, kde vám jej správně vymění.
- Neponořujte spotřebič ani žádnou jeho část do vody nebo jiné kapaliny.
- Abyste zabránili přehřátí, doporučujeme úplně rozvinout napájecí kabel a vytáhnout zástrčku ze sítě, když se spotřebič nepoužívá.
- Pokud máte z jakéhokoli důvodu pocit, že teplo poskytované zařízením je nadměrné, okamžitě se vzdalte od matrace.

- Při odpojování spotřebiče od sítě netahejte za kabel, vždy vytahujte ze zástrčky.
- Pro vaši bezpečnost a pro správnou funkci spotřebiče vždy používejte náhradní díly a příslušenství JOCCA.
- Po ukončení používání, před čištěním a v případě, že nepracuje správně, vždy odpojte zařízení z elektrické sítě.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je mokré; nenechávejte zařízení vystavené povětrnostním vlivům, jako je déšť, slunce, sníh atd.
- Nevkládejte špendlíky do matrace.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je pomačkaný nebo složený.
- Dlouhodobé používání s maximální úrovní regulace může vést k popálení pokožky. Nikdy nespěte na matraci.
- Kontrolujte zařízení, zda nejví známky opotřebení nebo poškození. Pokud takové známky existují nebo bylo zařízení používáno nesprávně, před dalším použitím se poraďte s distributorem.
- Nepoužívejte zařízení s mokrým nebo zpoceným tělem ani s mokřima nohama nebo rukama.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Zařízení má bezpečnostní systém, který jej vypne za 15 minut nepřetržitého provozu.
- Před připojením zařízení nejprve zkontrolujte, zda je v perfektním stavu.
- Připojte integrovaný adaptér CA/CC (obr. F) k dálkovému ovladači a druhý konec adaptéru připojte k elektrické síti, jak je znázorněno na obrázku.
- Potom připojte dálkové ovládání k matraci a ujistěte se, že kolíky lícují s otvory.
- Umístěte masážní matraci tam, kde ji chcete používat, a udělejte si na ní pohodlí.
- Vezměte dálkový ovladač a stiskněte tlačítko I/O, automaticky se aktivuje matrace a rozsvítí se kontrolka indikující, že zařízení je v provozu.
- Matrace má 5 masážních programů a 3 úrovně intenzity, které lze volit dálkovým ovládáním.
- Stisknutím tlačítka MODE (F1-F5) můžete zvolit masážní program od 1 do 5 procházejících F1, F2, F3, F4 a F5.
- Po zvolení masážního programu je možné jeho intenzitu až 3x zvýšit stisknutím tlačítka  :
 - I: nízká intenzita
 - II: střední intenzita
 - III: vysoká intenzita
- Kromě toho si můžete vybrat zónu, kterou chcete masírovat: krk, spodní část zad, záda a nohy, přičemž každou zónu vyberete pomocí dálkového ovládání. Stačí stisknout tlačítko každé zóny a ta se aktivuje. Kontrolka vám bude indikovat vybranou masážní zónu.
- Nakonec stiskněte tlačítko  pro aktivaci funkce ohřevu / funkce infračervené terapie a rozsvítí se kontrolka. Stisknutím stejného tlačítka  jej deaktivujete.
- Pro odpojení masážní funkce stačí znovu stisknout tlačítko I/O.
- Zařízení nebude vypnuto, dokud jej zcela neodpojíte od elektrické sítě.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojen od sítě.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo prostředky, které by mohly spotřebič poškodit.
- Vyčistěte zařízení suchým hadříkem, abyste odstranili zbytky prachu a nečistot.
- K čištění dálkového ovladače používejte suchý hadřík.
- Umístěte zařízení na čisté a suché místo.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

NABÍJEČKA: 100-240V ~ 50/60Hz 0,5A 12V DC 1,2A

Toto zařízení vyhovuje bezpečnostním požadavkům a ustanovením směrnic 2014/35/EU o nízkonapětových zařízeních a 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě.

RECYKLACE PRODUKTU – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Obal

Materiály použité na balení tohoto produktu jsou integrovány do systému sběru, třídění a recyklace odpadu. Pokud chcete tyto materiály zlikvidovat, měli byste použít popelnice nebo jiné komunální prostředky pro sběr odpadu, které jsou vhodné pro každý druh materiálu.



Elektrický a elektronický výrobek

Tento symbol znamená, že pokud chcete tento produkt na konci jeho životnosti zlikvidovat, musíte jej odevzdat společnosti pro sběr odpadu autorizované pro selektivní sběr odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

Tento produkt neobsahuje koncentrace látek považovaných za škodlivé pro životní prostředí.